




より正確に、より簡単に。

PAXgene® ccfDNA 採血管

血漿中のセルフリー（遊離）DNA を安定化し、保存することができます。




保存安定性

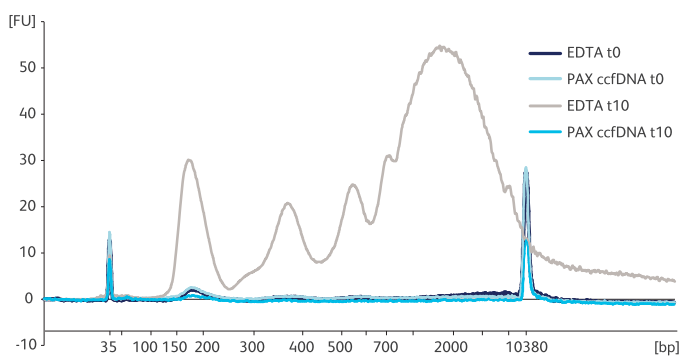

細胞融解を抑制し、ゲノムDNAの混入を抑制

EDTA 採血管と PAXgene® ccfDNA 採血管で採血した検体からセルフフリー（遊離）DNA を分離し、Agilent High Sensitivity DNA Kit を用いて比較を行った。採血直後の検体を t0、10 日間室温保存された検体を t10 とした。EDTA 採血管で 10 日間保存された検体 (EDTA t10) では、血球由来のゲノム DNA と推察される大きいサイズのゲノム DNA が増加した。一方、PAXgene® ccfDNA 採血管で保存された検体では、血漿中へのゲノム DNA の混入が抑制された。

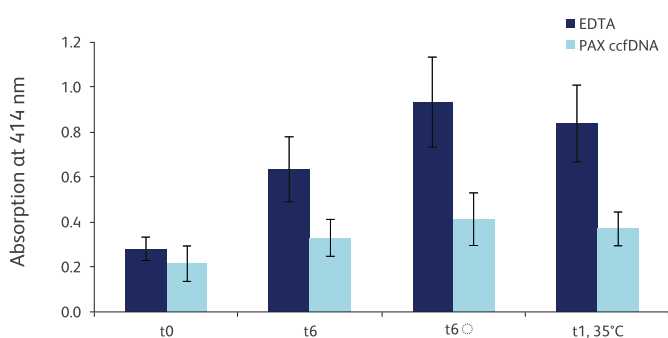

輸送・保存中の溶血を抑制

EDTA 採血管と PAXgene® ccfDNA 採血管で採血した検体 (n=8) を 35°C 1 日 (t1、35°C)、室温 6 日 (t6)、5 時間連続転倒混和後に室温で 6 日間保存した (t6 ◯)。それらの検体の血漿中の遊離ヘモグロビンの吸光度 (414nm) を測定し溶血を検討した。EDTA 採血管では保存期間が延びるに従い溶血量が増大したが、PAXgene® ccfDNA 採血管で保存された検体では、EDTA 採血管に比べ溶血が抑制された。

出典：ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY 2015 Annual Meeting 発表資料

PAXgene® ccfDNA 採血管

製品保管温度



カタログ番号	採血量 (mL)	外径 × 長さ (mm)	包装単位	希望小売価格 (税抜)	統一商品コード
768115	10	16 × 100	100 本	¥ 99,000	555552207

販売名：パクスジーンDNA採血管 医療機器認証番号：219AFBZX00028000

販売名：BD バキュティナ ブラッドコレクションセット 医療機器認証番号：220AFBZX00064000

他社採血ホルダーと併用した場合、採血管を採血ホルダーから抜く際に BD ヘモガード™ キャップが抜ける可能性があります。採血には BD バキュティナ® セーフティロック™ ブラッドコレクションセット (ホルダー付) のご使用をお勧めいたします。

検体保存期間 15°C ~ 25°C 以下：7 日、25°C を超えて 35°C 以下：1 日

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX: 024-593-3281

bd.com/jp/

PAXgeneはPreAnalytiX, GmbHの商標です。

© 2017 BD. BD, BDロゴ, BD Vacutainer及びBD Safety-LokはBecton, Dickinson and Companyの商標です。

62-124-00 R0-1707-000.6-035

