


えっ！こんなサービスがあったのか！

ラボ用ポンプのサブスク

● サービス紹介編

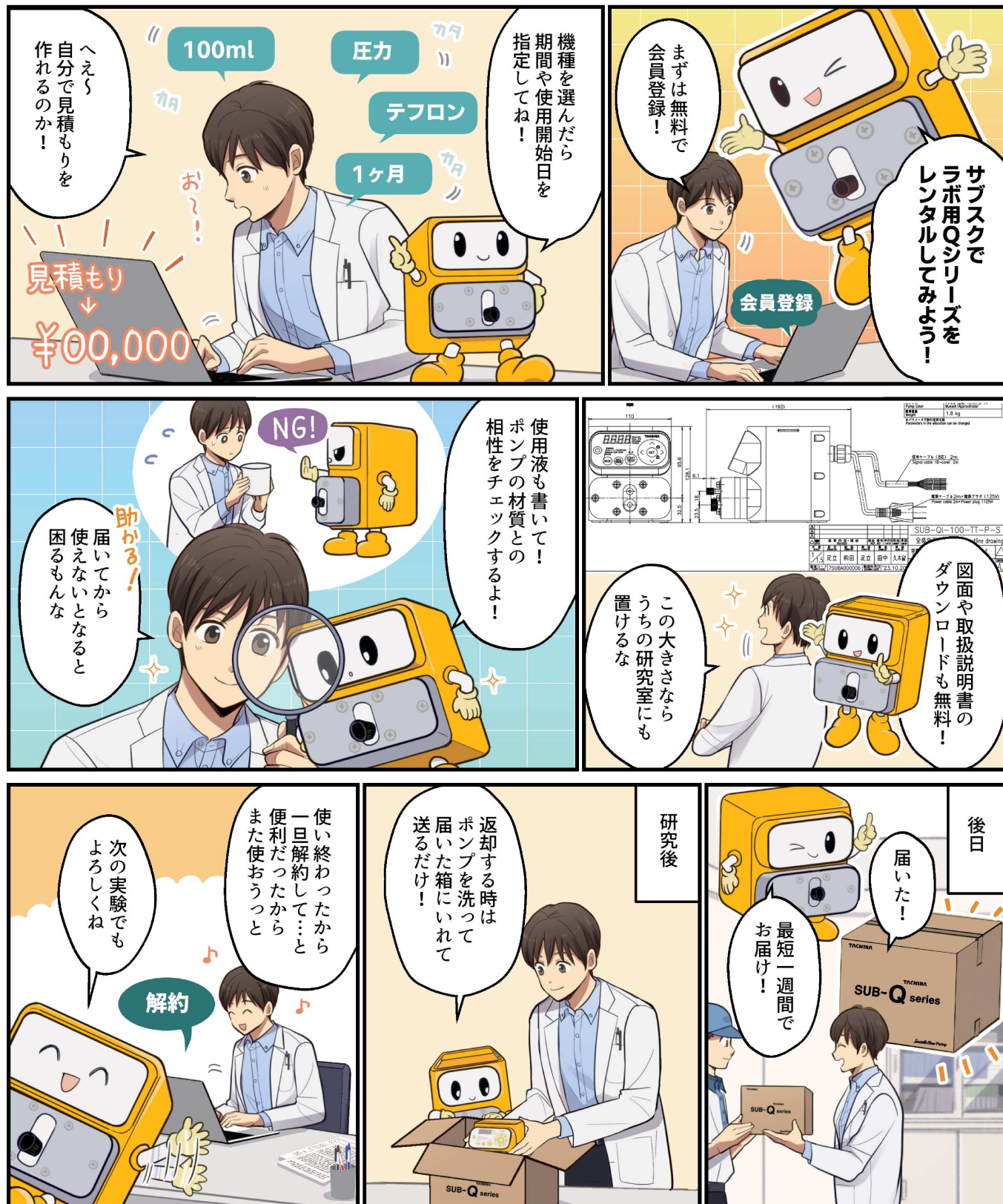

今すぐ検索！

タクミナ サブスク



TACMINA

■ポンプ型式 SUB-QI

機 種	100	60	30	10
流 量	0.1~100mL/min	0.1~60mL/min	0.1~30mL/min	0.1~10mL/min
最高吐出圧力	0.3MPa	0.6MPa	1.0MPa	2.0MPa
接液部材質	TT 6T	TT 6T	6T	6T
接続口径 チューブ径	吐出1/8 × 吸込1/4 (チューブは付属しません)			
電 源	100V専用 プラグ付き (ケーブル2m)			

名 称	TT	6T
形 状		
ポンプヘッド	PTFE	SUS316
ダイヤフラム	PTFE/CR	PTFE/CR
シート弁・ パッキン	特殊フッ素ゴム (パーフロ)	特殊フッ素ゴム (パーフロ)
継 手	PTFE	SUS316

■制御機能

手動運転	0.1mL/min または 0.01mL/min 単位で設定可能
パルス入力 比例運転	0.1~999.9mL/pulse または 0.1~999.9L/pulse
アナログ入力 比例運転	目標値 (SV) と最大流量 (HV) の設定により制御可能

- すぐれた定量性・応答性
- 脈動のない連続一定流
- 流量設定・校正がカンタン
- 長期間変わらない送液精度
- 液を漏らさず、変質させない
- 配管閉塞・空運転でも壊れない



■入出力信号仕様

信 号	仕 様
アナログ 入 力	1ポート DC4~20mA 入力抵抗：約110Ω
デジタル 入 力	2ポート 無電圧接点 オープンコレクタ※1 最大パルス数：6000pulse/min 最小パルス幅：5msec (ON時間) 以下から選択して割り付け： パルス入力、停止／運転入力、レベル入力、MAX運転入力
出 力	2ポート DC25V 10mA 以下から選択して割り付け： 単位パルス出力、警報出力、動作出力

※1 オープンコレクタの残留電圧は1V以下となるようにしてください。
*デジタル信号はシンクロジック (NPN) です。

各ニーズに応じたスムーズフローポンプをラインアップ 研究から実装プロセスへスムーズにスケールアップ

ラボ用ポンプ



[流量] ~5mL/min



~100mL/min



~30L/min



~300L/min

※上記は販売商品の一例です。詳細はお問い合わせください。

株式会社 タクミナ

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14

サブスク窓口

TEL 06-7178-4508

Email tac_subsc@tacmina.co.jp

www.tacmina.jp 証券コード 6322

サブスクリプションサービス詳細

会員登録・価格についてはこちらから

<https://www.tacmina.jp/>



T-119 (5) -
2024/4/I---



JQA-A-1274
JQA-EV0037 生産管理

・本サービスは日本国内での利用に限らせていただきます。
・サービス/製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。