
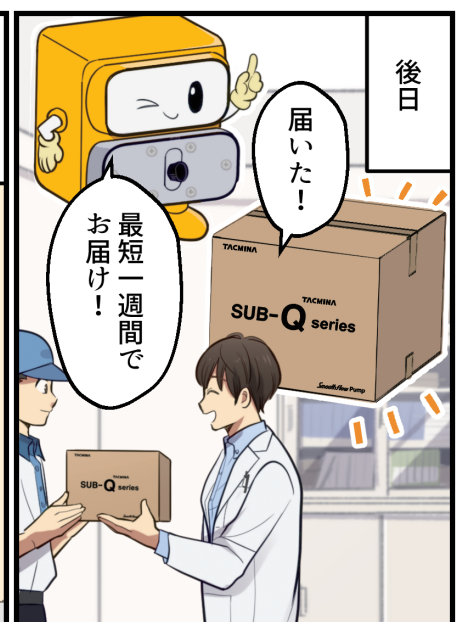
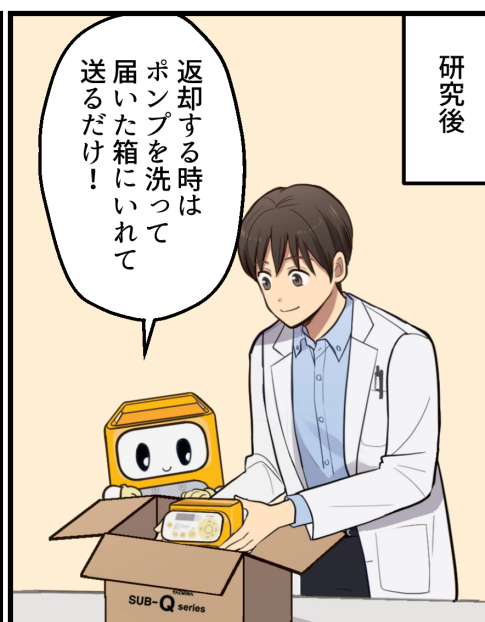
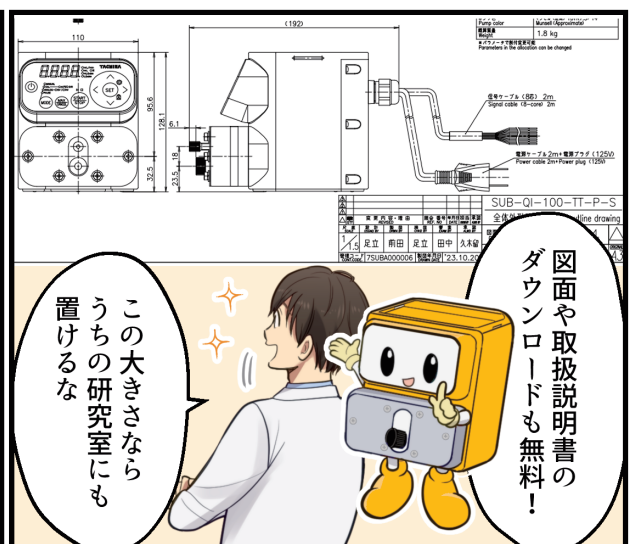
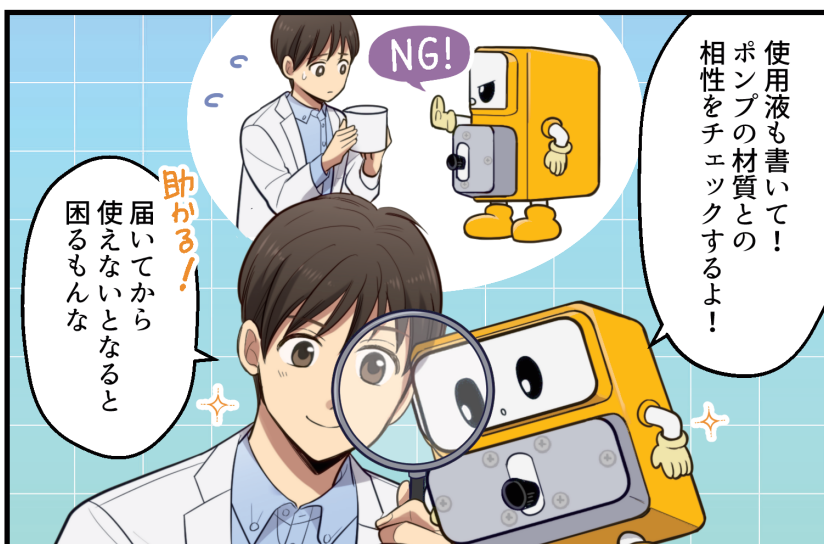
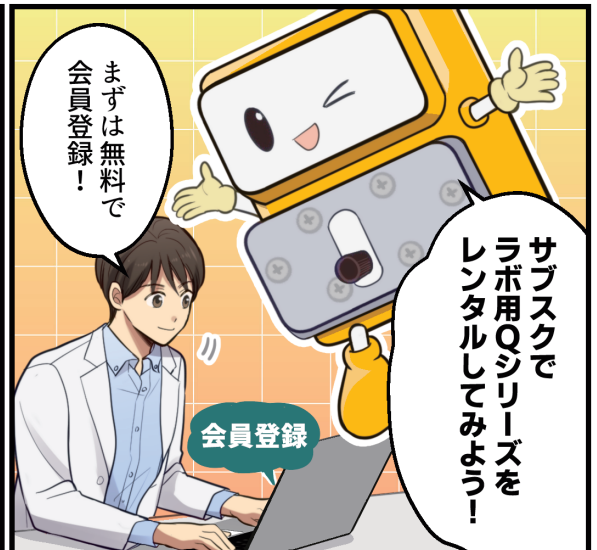


えっ！こんなサービスがあったのか！

ラボ用ポンプのサブスク

● サービス紹介編

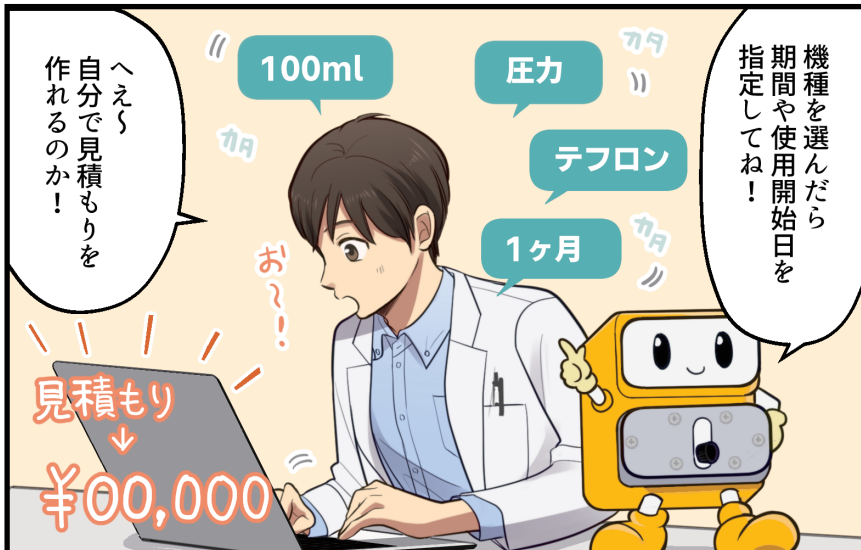

今すぐ検索！

タクミナ サブスク



TACMINA

■ポンプ型式 SUB-QI

機 種	100		60		30		10	
流 量	0.1～100mL/min		0.1～60mL/min		0.1～30mL/min		0.1～10mL/min	
最高吐出圧力	0.3MPa		0.6MPa		1.0MPa		2.0MPa	
接液部材質	TT	6T	TT	6T	6T		6T	
接続口径 チューブ径	吐出1/8 × 吸入1/4(チューブは付属しません)							
電源	100V専用 プラグ付き(ケーブル2m)							

名 称	TT	6T
形 状		
ポンプヘッド	PTFE	SUS316
ダイヤフラム	PTFE/CR	PTFE/CR
シート弁・ パッキン	特殊フッ素ゴム (パーフロ)	特殊フッ素ゴム (パーフロ)
継 手	PTFE	SUS316

■制御機能

手動運転	0.1mL/min または 0.01mL/min 単位で設定可能
パルス入力 比例運転	0.1~999.9mL/pulse または 0.1~999.9L/pulse
アナログ入力 比例運転	目標値(SV)と最大流量(HV)の設定により制御可能

- すぐれた定量性・応答性
- 脈動のない連続一定流
- 流量設定・校正がカンタン
- 長期間変わらない送液精度
- 液を漏らさず、変質させない
- 配管閉塞・空運転でも壊れない



■入出力信号仕様

信 号	仕 様
アナログ 入 力	1ポート DC4-20mA 入力抵抗: 約110Ω
デジタル 入 力	2ポート 無電圧接点 オープンコレクタ※1 最大パルス数: 6000pulse/min 最小パルス幅: 5msec (ON時間) 以下から選択して割り付け: パルス入力、停止/運転入力、レベル入力、MAX運転入力
出 力	2ポート DC25V 10mA 以下から選択して割り付け: 単位パルス出力、警報出力、動作出力

※1 オープンコレクタの残留電圧は1V以下となるようにしてください。
*デジタル信号はシンクロジック(NPN)です。

各ニーズに応じたスムーズフローポンプをラインアップ 研究から実装プロセスへスムーズにスケールアップ

ラボ用ポンプ




[流量] ~5mL/min



~100mL/min



~30L/min

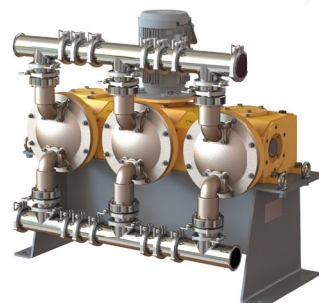

~300L/min

※上記は販売商品の一例です。詳細はお問い合わせください。

株式会社 タクミナ

〒541-0047 大阪市中央区淡路町2-2-14

サブスク窓口

TEL 06-7178-4508

Email tac_subsc@tacmina.co.jp

www.tacmina.jp 証券コード 6322

サブスクリプションサービス詳細

会員登録・価格についてはこちらから

<https://www.tacmina.jp/>



・本サービスは日本国内での利用に限らせていただきます。
・サービス/製品改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。



JQA-1274
JQA-EM0637 生産本部